

AST/GOT Líquido

Método Cinético UV-IFCC
Reactivo Líquido – Listo para su uso

R1: 4x25 ml + R2: 1x10 ml REF P7036
R1: 5x50 ml + R2: 1x25 ml REF 7036

Intención de Uso

Kit para la determinación cuantitativa de Aspartato Amino Transaminasa AST/GOT (EC 2.6.1.1) en suero y plasma de acuerdo a las recomendaciones IFCC.

Principio

Ante la presencia del α -ketoglutarato, AST/GOT en la muestra transforma el aspartato en oxalacetato y Glutamato. Ante la presencia de NADH y el malato deshidrogenasa, el oxalacetato se convierte en malato y NAD. La oxidación NADH en unidad de tiempo a 340 nm es proporcional a la concentración AST/GOT en la muestra.

Muestra

Suero, EDTA o plasma heparinizado. Evitar muestras hemolizadas. La actividad de AST/GOT en el suero decrece el 8% después de 3 días a 4°C y 10% a 20-25°C

Contenido del empaque

Reactivos	REF P7036	Cantidad	REF 7036	Cantidad	Riesgo
REACTIVO 1	P7036R1	4 x 25 ml	7036R1	5 x 50 ml	*
REACTIVO 2	P7036R2	1 x 10 ml	7036R2	1 x 25 ml	*

Reactivos

REACTIVO 1 Buffer Tris (pH8.1) 88 mmol/L, L-asparato 265 mmol/L MDH ≥ 462 U/L, LDH ≥ 660 U/L, α -ketoglutarato 13.2 mmol/L, Sodio azida 30 mmol/L

REACTIVO 2 Buffer Tris (pH10.2) 10 mmol/L, NADH 2.6 mmol/L, sodio azida 30 mmol/L

Estabilidad: Los reactivos están listos para su uso. Almacenar de 2-8°C y protegerlo de la luz para conservar la estabilidad de los reactivos hasta la fecha de expiración indicada en el rótulo. No congelar. Una vez abiertos los reactivos son estables por 2 meses de 2-8°C si se evita la contaminación. Mantener los frascos bien cerrados cuando no están en uso. No usar los reactivos en caso de turbidez.

Preparación del reactivo en uso (sólo para procedimiento mono-reactivo)

Mezclar 10 volúmenes de reactivo 1 con 1 volumen de reactivo 2
Estabilidad 5 días de 20-25°C o 4 semanas de 2-8°C guardados en un envase cerrado protegido de la luz.

Procedimiento

Método:.....Decrecimiento cinético
Longitud de onda:.....340 nm (334-365)
Cubeta:.....1 cm de vía óptica
Temperatura:.....30, 37°C
Tiempo promedio:.....3 minutos
Medición:.....Contra aire o agua destilada
Muestra/Reactivos (bi-activos)1/10/1
Muestra/Reactivos (mono-activos)1/10

Materiales requeridos pero no incluidos:

Analizador Semiautomático/Automático
Micropipetas de 10 μ l y 1.0ml
Gradillas para tubo de ensayo
Baño maría a 37°C
Timer

Procedimiento Bi-reactivo

El reactivo elegido necesario para la prueba debe alcanzar la temperatura elegida para el análisis.

Pipetear en la cubeta:

Muestra	100 μ l
Reactivo 1	1.0 ml

Mezclar e incubar a la temperatura elegida por 1 minuto Adicionar

Reactivo 2	100 μ l
------------	-------------

Mezclar y vaciar en la cubeta de prueba. Incubar a la temperatura de la prueba por 1 minuto. Leer la absorbancia inicial y repetir la lectura a intervalos constantes de 1 minuto, por 3 minutos. Calcular el valor promedio de las variaciones de la absorbancia por minuto ($\Delta A/min$).

Los volúmenes de reacción pueden ser variados proporcionalmente sin ninguna modificación en el cálculo.

Procedimiento Mono-reactivo

Que el reactivo necesario para la prueba alcance la temperatura elegida para el análisis.

Pipetear en la cubeta:

Muestra	100 μ l
Reactivo en uso	1.0 ml

Mezclar y vaciar en la cubeta de prueba. Incubar a la temperatura de la prueba por 1 minuto. Leer la absorbancia inicial y repetir la lectura a intervalos constantes de 1 minuto, por 3 minutos. Calcular el valor promedio de las variaciones de la absorbancia por minuto ($\Delta A/min$).

Los volúmenes de reacción pueden ser variados proporcionalmente sin ninguna modificación en el cálculo.

Cálculo

Para calcular la actividad enzimática en la muestra, multiplicar $\Delta A/min$ por el factor correcto del siguiente cuadro:

λ	Procedimiento Mono-reactivo	Procedimiento del Bi-reactivo
334 nm :	1780	1945
340 nm :	1746	1905
365 nm :	3235	3529

Valores de referencia

	30°C	37°C
Hombres	Hasta 25 U/L	Hasta 31 U/L
Mujeres	Hasta 21 U/L	Hasta 31 U/L

Cada laboratorio debe definir sus propios valores de referencia para este método.

Control de calidad

Se recomienda un programa de control de calidad a todos los laboratorios de química clínica.

Se recomienda un control de suero en rangos normales y elevados para cada prueba.

Los valores obtenidos deben ser incluidos dentro de los rangos aceptados del fabricante para el método en uso.

Características de funcionamiento

Sensibilidad: La sensibilidad del método es de 3 U/L

Linealidad: Hasta 300 U/L

Para valores elevados, diluir la muestra 1:10 con solución salina y multiplicar los resultados por 10.

Precisión dentro de la corrida

	Nivel 1	Nivel 2
Promedio [U/L]	23.5	238
DS	0.95	3.36
CV %	4.0	1.4

Precisión entre la corrida

	Nivel 1	Nivel 2
Promedio [U/L]	27.0	222
DS	1.41	7.5
CV %	4.2	3.17

Interferencia: Los lípidos hasta 2000 mg/dl de triglicéridos no interfieren. La bilirubina hasta 40 mg/dl no interfiere. No hay interferencia hasta los 30 mg/dl de ácido ascórbico. La presencia de hemólisis en la muestra puede dar valores falsamente positivos.

Correlación contra un método de referencia: La correlación del método (Y) contra un método de referencia (X) ha evidenciado la siguiente ecuación:

$$Y = 1.0681 X + 3.0802 \quad r = 0.971$$

 Fabricado por FAR srl

Via Fermi, 12-370026 Pescantina - VERONA - Italia
Tel. + 39 045 6700870-67 - 00871 - Fax + 39 045 7157763
Pag. web: <http://www.farddiag.com>
e-mail: farddiag@farddiag.com

Representante Exclusivo:



PFH
lab Medic s.r.l.
Tecnología de Calidad en Equipos e Insumos para Laboratorio

Av. Tacna N° 482 - Of. 403 - Lima
Telefax: 330-8226 / 7153981 / 7153982
R.U.C.: 20512588868
E-mail: ventas@pflabmedic.com.pe
www.pflabmedic.com.pe

Parámetros para Analizadores Automatizados:

Longitud de onda:.....	340 nm (334-365)
Tipo de reacción:.....	Cinético
Dirección de la reacción:.....	Decrecimiento
Temperatura de reacción:.....	37 °C
Relación de muestra/reactivo:.....	1:100
Tiempo de equilibrio:.....	2 segundos
Tiempo de lectura:.....	3 segundos
Tiempo de retardo:.....	180 segundos
Absorbancia de blanco:.....	0.300 D.O.
Máxima absorbancia:.....	2.000 D.O.
Valor normal superior:.....	31 U/L
Linealidad:.....	300 U/L

Se sugiere para programar, leer antes el manual de usuario del equipo en uso, de acuerdo a los requerimientos del analizador.

Advertencia y Precauciones

- (*) Los reactivos peligrosos están marcados con un asterisco.
Referirse a la hoja de seguridad.
- Usar indumentaria adecuada de protección-no pipetear con la boca
- Eliminar los residuos de acuerdo a las normas locales
- Leer las instrucciones del kit antes de ejecutar la prueba.
- Usar solo los reactivos contenidos en el kit y los reactivos recomendados
- No usar reactivos de diferentes lotes.
- No usar reactivos que ya hayan expirado
- No usar reactivos de otros fabricantes
- Aplicación en variedad de analizadores y automatizados.

Presentación:

R1: 4x25 ml + R2: 1x10 ml Cod. P7036

R1: 5x50 ml + R2: 1x25 ml Cod. 7036

Bibliografía

1. Recomendaciones sobre métodos I.F.C.C para medición de concentraciones catalíticas de enzimas, Química Clin., 23:5 (1977).
2. Wroblewsky F., Ladue J.S., Soc.Exper. Biou y Med, 91:569 (1965).
3. Documento NCCLS, "Procedimientos para la colección de especímenes de la sangre arterial" Estándar Aprobado, 3era. Ed. (1999).
4. EU-Directiva 90/269/EEC Comisión directiva de 8 de Marzo de 1999 adaptado a la progresión técnico de principios de buenas prácticas de laboratorio como se especifica en la directiva de consejo 87/18/EEC



Fabricado por FAR srl


Via Fermi, 12-370026 Pescantina - VERONA - Italia

Tel. + 39 045 6700870-67 - 00871 - Fax + 39 045 7157763

Pag. web: <http://www.fardiac.com>

e-mail: fardiac@fardiac.com

Representante Exclusivo:

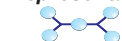

PFH
lab Medic E.I.R.L.
Tecnología de Calidad en Equipos e Insumos para Laboratorio

Av. Tacna N° 482 - Of. 403 - Lima
Telefax: 330-8226 / 7153981 / 7153982

R.U.C.: 20512588868

E-mail: ventas@pfhlabmedic.com.pe

www.pfhlabmedic.com.pe